





# Dale®

Hold-n-Place®

Foley-katetrin liimatyyny irti

## Käyttöohjeet

1. Puhdista ja valmistele kiinnitysalue. **(A)**
2. Avaa Dale Hold-n-Place niin, että keskellä olevat taustapaperit tulevat näkyviin. **(B)**
3. Poista keskellä olevat taustapaperit ja aseta virtsakatetri näkyvillä olevaan liimapintaan. **(B)**
4. Kierrä kiinnitysluska katetrin luumenin taakse kohtaan, johon drenipussi liitetään. Voit poistaa ylemmän taustapaperin, jos lisäkiinnitys on tarpeen. **(C)**
5. Poista taustapaperit liimapinnalta ja kiinnitä pidin ihoon. **(C)**
6. Dale Hold-n-Place -pitimen tulee olla kiinnityksen jälkeen kuten kuvassa D. **(D)**

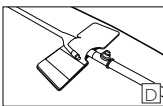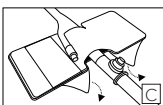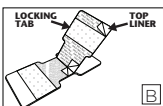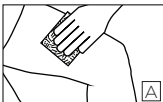

## Vaihtaminen

joka kolmas päivä tai tarvittaessa useammin.

## Poistaminen

liimapinta on irrotettava varovasti, jotta ei vahingoiteta ihoa.

## Lisäetuja

Kiinnitysluskaa voidaan nostaa letkun sijainnin muuttamista varten

### Potilaskohtainen. Kertakäyttöinen.

Kiinnityksessä opastava video on katsottavissa osoitteessa [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

Dalen lääketieteellisiä tuotteita on saatavana lääketieteellisten ja sairaalatarvikkeiden myyjiltä.

**Ei ole valmistettu luonnonkumilateksista.**

Dale® & Hold-n-Place® ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä dalen lääkevalmisteet, Inc Yhdysvalloissa.



Dale Medical Products, Inc.  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298  
T: 508-695-9316



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Saksa

