

Dale®

Hold-n-Place®

Foley-katheter Klebestreifen

Anwendung

1. Hautstelle säubern und vorbereiten **(A)**.





2. Dale Hold-n-Place öffnen und mittlere Schutzfolien freilegen **(B)**.

3. Mittlere Schutzfolien entfernen und Harnkatheter auf exponierte Klebestelle legen **(B)**.

4. Sicherungsglasche hinter dem Lumen dort um den Katheter wickeln, wo der Drainagebeutel angeschlossen wird.

Für eine besonders gute Befestigung kann die obere Schutzfolie ebenfalls abgezogen werden **(C)**.

5. Schutzfolie unten von der Halterung abziehen, um Klebeseiten freizulegen, und Halterung auf der Haut anbringen **(C)**.
6. Der Dale Hold-n-Place sollte zum Schluss wie in Abbildung D abgebildet angebracht sein **(D)**.

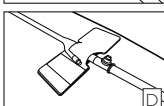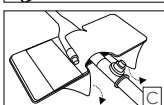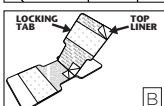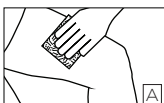

Wechseln

Alle 3 Tage oder bei Bedarf auch früher.

Entfernen

Klebestreifen vorsichtig abziehen, um Hautverletzungen zu vermeiden.

Zusätzliche Vorteile

Die Sicherungsglasche kann zur Anpassung des Tubus angehoben werden.

Nur für den Gebrauch an einem Patienten bestimmt. Einwegprodukt.

Ein Video der Anwendung finden Sie unter www.dalemed.com

Medizinische Produkte von Dale erhalten Sie von Ihrem bevorzugten Lieferanten für Krankenhausbedarf und medizinische Produkte.

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.

Dale® & Hold-n-Place® sind eingetragene Marken von Dale Medical Products, Inc. in den USA.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298
T: 508-695-9316



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Deutschland

