


Dale®

Hold-n-Place®


Remendo de adesivo de cateter Foley

Instruções de aplicação


1. Limpe e prepare a área da aplicação. **(A)**

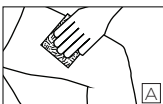


2. Abra o Hold-n-Place da Dale de forma a expor os revestimentos centrais. **(B)**

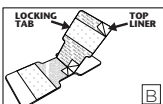

3. Remova os revestimentos centrais e coloque o cateter urinário no adesivo exposto. **(B)**

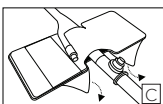

4. Passe a guia de trava além do lúmen do cateter, onde se liga a bolsa de drenagem. Pode-se remover o revestimento superior para que se prenda mais firmemente. **(C)**

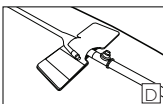

5. Remova os revestimentos base a fim de expor o adesivo e aplique à pele. **(C)**

6. O Hold-n-Place da Dale deve aparecer como se mostra na figura D quando a colocação estiver concluída. **(D)**

Troca

a cada 3 dias, ou antes, se necessário

Remoção

o adesivo deve ser removido com cuidado para evitar trauma à pele

Benefícios adicionais

Pode-se levantar a guia de trava para o reposicionamento do tubo.

Para a utilização num único doente. Descartável.

Para ver um vídeo sobre a aplicação, aceda www.dalemed.com

Os produtos médicos da Dale estão disponíveis junto do seu representante preferido de produtos hospitalares/médicos.

Não fabricado com látex de borracha natural.

Dale® & Hold-n-Place® são marcas registradas da Dale Medical Products, Inc. nos EUA.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298
T: 508-695-9316



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Alemanha

