
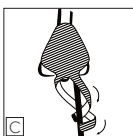
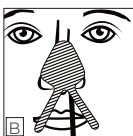
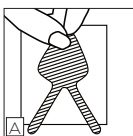


Dale®

Holder til ventrikelsonde

Anbringelse

1. Når ventrikelsonden er anlagt: Sørg for, at både næsen og ventrikelsonden er ren og tør. Vi anbefaler rensning ifølge hospitalets protokol.
2. Træk ventrikelsonden af papiret. Start i toppen af næsestykket. **(A)**
3. Anbring næsestykket i den rette position på næsen, en smule skråt mod det næsebor, som ventrikelsonden er ført ind i. **(B)**
4. Vælg den flig, der er tættest på sonden, og vikl den i spiral rundt om sonden, så den sidder midt i det valgte næsebor. **(C)**
5. Vikl den anden flig rundt om sonden på samme spiralfacon. **(C)**
6. Skift sondeholderen efter 3 dage, eller oftere efter behov.

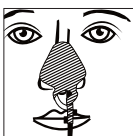

Aftagning

Når ventrikelsondeholderen skal tages af patienten, skal man blot trække i de ikke-klæbende spidser i enden af hver flig, så de kan vikles af sonden.

Fortsæt med at trække sondeholderen forsigtigt opad for at tage den af patientens næse.

Til brug til en enkelt patient. Til engangsbrug.

Der ligger en video, der viser anbringelsen, på www.dalemed.com.

Medicinske produkter fra Dale kan fås hos forhandlere af hospitalsudstyr/medicinsk udstyr.

Not made with natural rubber latex.

Dale® er et registreret varemærke, der tilhører Dale Medical Products, Inc. i USA og EU.

TLF.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Tyskland

