
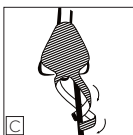
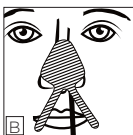
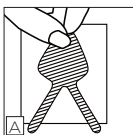


Dale®

Houder voor neus-maagsonde

Instructies voor het aanbrengen

1. Na plaatsing van de neus-maagsonde zorgt u dat de neus en de sonde beide schoon en droog zijn. Aanbevolen wordt de sonde te reinigen volgens het ziekenhuisprotocol.
2. Trek de houder voor de neus-maagsonde van het draagvel los te beginnen bij de bovenkant van de neuspleister. **(A)**
3. Plaats en plak de neuspleister op de neus, lichtjes schuin gericht naar het neusgat waarin de neus-maagsonde is ingebracht. **(B)**
4. Neem het lipje dat zich het dichtst bij de neus-maagsonde bevindt, en wikkel het spiraalsgewijs rond de sonde zodanig dat de sonde grotendeels op het midden van het gekozen neusgat is uitgericht. **(C)**
5. Wikkel het andere lipje op dezelfde manier spiraalsgewijs om de sonde. **(C)**
6. Ververs de sondehouder na 3 dagen of eerder indien nodig.

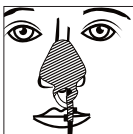

Verwijderen

Verwijder de houder voor de neus-maagsonde van de patiënt door eenvoudig aan de niet-klevende punt aan het uiteinde van elk lipje te trekken en de lipjes van de sonde af te wikkelen.

Trek de sondehouder voorzichtig verder opwaarts om hem van de neus van de patiënt te verwijderen.

Voor gebruik bij één patiënt. Disposable.

Een videofilmpje over het aanbrengen van de houder vindt u op www.dalemed.com

De medische producten van Dale zijn verkrijgbaar bij uw voorkeursleverancier van ziekenhuis-/medische benodigdheden.

Niet vervaardigd met natuurrubberlatex.

Dale® is een gedeponeed handelsmerk van Dale Medical Products, Inc. in de VS en de EU.

TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Duitsland

