
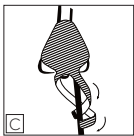
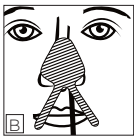


Dale®

Nenä-mahaletkun pidin

Käyttöohjeet

1. Kun nenä-mahaletku on paikoillaan, varmista, että nenä ja letku ovat puhtaat ja kuivat. Suosittelemme, että puhdistaminen tehdään sairaalan käytännön mukaan.
2. Vedä nenä-mahaletkun pidin irti taustapaperista nenätyynyn yläosasta alkaen. **(A)**
3. Aseta ja kiinnitä nenätyyny nenän päälle hieman kulmittain kohti sierainta, johon nenä-mahaletku on työnnetty. **(B)**
4. Valitse nenä-mahaletkua lähinnä oleva kieleke ja ala kiertää sitä letkun ympärille niin, että suurin osa letkusta tulee valitun sieraimen keskelle. **(C)**
5. Kierrä jäljellä oleva kieleke samalla tavalla. **(C)**
6. Vaihda letkun pidin 3 päivän jälkeen tai tarvittaessa aiemmin.

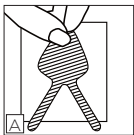

Poistaminen

Kun haluat poistaa nenä-mahaletkun pitimen potilaalta, kierrä kierrettynä olevat kielekkeet irti letkusta vetämällä kielekkeiden irrallisista päistä.

Vedä letkun pidintä varovasti ylöspäin ja irrota se potilaan nenästä.

Potilaskohtainen. Kertakäyttöinen.

Kiinnityksessä opastava video on katsottavissa osoitteessa www.dalemed.com.

Dalen lääketieteellisiä tuotteita on saatavana lääketieteellisten ja sairaalatarvikkeiden myyjiltä.

Ei ole valmistettu luonnonkumilateksista.

Dale® on Dale Medical Products, Inc. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja EU:n alueella.

PUHELIN: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Saksa

