
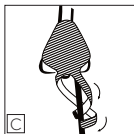
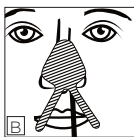
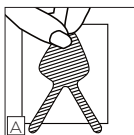


# Dale®

## NasoGastric 튜브 홀더

### 착용 방법

1. NG 튜브가 제자리를 잡은 후, 코와 NG(NasoGastric) 튜브, 둘 모두 깨끗하고 건조한 상태인지 확인하십시오. 저희는 병원의 프로토콜에 따라 튜브를 청소하도록 권장합니다.
2. 코 패드의 맨 위쪽에서 벗겨내기 시작하면서 라이너에서 NG 튜브 홀더를 벗겨내십시오. (A)
3. NG 튜브가 삽입된 콧구멍 쪽으로 약간 기울인 각도로 코 패드를 위치시키고 코에 붙이십시오. (B)
4. NG 튜브의 대부분이 그 튜브가 삽입된 콧구멍 중심에 위치하도록 튜브와 가까운 꼬리끈으로 튜브를 나선형으로 돌려 싸십시오. (C)
5. 동일한 나선 기법을 사용하여 남은 꼬리끈으로 튜브를 돌려 싸십시오. (C)
6. 3일 후에, 또는 필요한 경우 더 빨리 튜브 홀더를 교체하십시오.

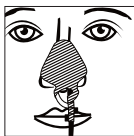

### 제거

환자에서 NG 튜브 홀더를 빼내려면, 각 꼬리 끈의 말단부의 비부착된 끝을 그냥 잡아 당겨 튜브에서 꼬리끈을 푸십시오.

계속해서 살며시 튜브 홀더를 위로 잡아 당겨 환자 코에서 빼내십시오.

### 단일 환자용. 1회용.

착용 시연 영상을 보려면, [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)을 방문하십시오.

Dale 의료 제품은 이용하시는 병원/의료용품 공급상으로부터 구입하실 수 있습니다.

### 천연 고무 라텍스로 제조되지 않음.

Dale®은 미국과 유럽연합에 등록된 Dale Medical Products, Inc.의 상표입니다.

전화: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Germany (독일)

