


Dale®


Suporte de Sonda Nasogástrica

Instruções de aplicação


1. Depois de a sonda NG estar colocada, verifique se o nariz e a sonda NG estão limpos e secos. Recomendamos que se faça a limpeza de acordo com o protocolo do hospital.

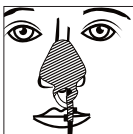


2. Remova o suporte de sonda NG do revestimento, a começar na parte superior da almofada do nariz. **(A)**

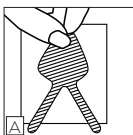

3. Posicione e aplique a almofada do nariz ao nariz num leve ângulo na direção da narina em que a sonda NG está inserida. **(B)**

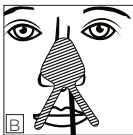

4. Escolha a fita mais perto da sonda e comece por enrolar a fita de modo espiral, de forma que a maior parte da sonda NG fique centralizada na narina selecionada. **(C)**

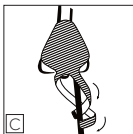

5. Enrole o que restar da fita com a utilização da mesma técnica espiral. **(C)**
6. Troque o suporte de sonda depois de 3 dias ou antes, se necessário.

Remoção

Para retirar o suporte de sonda NG do doente, basta puxar as extremidades não adesivas no fim de cada fita para soltá-las da sonda.

Continue a puxar o suporte de sonda com cuidado, num movimento para cima, para removê-lo do nariz do doente.

Para a utilização num único doente. Descartável.

Para ver um vídeo sobre a aplicação, aceda www.dalemed.com

Os produtos médicos da Dale encontram-se disponíveis no revendedor de materiais hospitalares/médicos da sua preferência.

Não fabricado com látex de borracha natural.

Dale® é marca registada da Dale Medical Products, Inc. nos EUA e na UE.

TELEFONE: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Alemanha

