
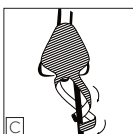
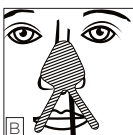
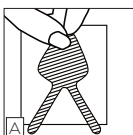


Dale®

Soporte para sonda nasogástrica

Instrucciones de uso

1. Una vez colocada la sonda nasogástrica (NG), verifique que la nariz y la sonda estén limpias y secas. Recomendamos limpiar según el protocolo del hospital.
2. Despegue el forro de la sonda NG comenzando en la parte superior de la porción para la nariz. **(A)**
3. Aplique la porción para la nariz sobre la nariz, con una ligera desviación hacia la narina donde está insertada la sonda NG. **(B)**
4. Con la tira más cercana a la sonda comience a envolver la sonda NG en forma de espiral, de manera que la mayor parte de la sonda quede centrada en la narina seleccionada. **(C)**
5. Use la misma técnica en espiral para enrollar la otra tira. **(C)**
6. Cambie el soporte de la sonda al cabo de 3 días o antes si fuera necesario.

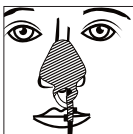

Cómo retirar

Para retirarle al paciente el soporte de la sonda NG, simplemente tire de las puntas no adhesivas al extremo de cada tira para desenrollarlas del tubo.

Siga tirando hacia arriba el soporte de la sonda para quitarlo de la nariz del paciente.

Para uso en un solo paciente. Desechable.

Para ver un video sobre cómo colocar el dispositivo, visite www.dalemed.com

Los productos médicos Dale están disponibles a través de su distribuidor favorito de productos médicos y hospitalarios.

Fabricado sin látex de goma natural.

Dale® es una marca comercial registrada de Dale Medical Products, Inc. en los EE.UU. y la UE.

TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Alemania

