
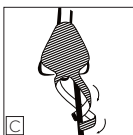
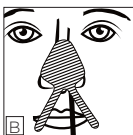
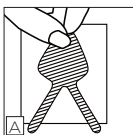


Dale®

แผ่นยึดสายให้อาหาร NasoGastric

วิธีการใช้

1. หลังจากจัดวางสายให้อาหาร NG เข้าที่แล้ว ทำให้แน่ใจว่าจมูก และสายให้อาหาร NG สะอาด และแห้ง เราขอแนะนำว่าควรทำความสะอาดตามโปรโตคอลของโรงพยาบาล
2. ลอกเทปบนแผ่นยึดสายให้อาหารออกจาก ที่ร่องตอนบนของแผ่นปะจมูก (A)
3. จัดตำแหน่งและแปะแผ่นปะจมูก ลงบนจมูกโดยทำมุมเล็กน้อยที่ ด้านบนของรูจมูกที่จะสอดสาย NG เข้าด้านใน (B)
4. เลือกแผ่นที่ใกล้สายให้อาหาร ที่สุดและเริ่มพันเป็นรูปก้นหอย เพื่อให้สายให้อาหาร NG อยู่ ตรงกึ่งกลางของรูจมูกข้างที่ เลือกไว้ (C)
5. พันหุ้มแผ่นที่เหลือโดยใช้ เทคนิคการพันเป็นรูปก้นหอย เช่นกัน (C)
6. เปลี่ยนแผ่นยึดสายให้อาหาร หลังจาก 3 วันหรือเร็วกว่านั้น หากจำเป็น

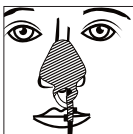

การถอดออก

ถอดแผ่นยึดสายให้อาหาร NG จากผู้ป่วยโดยการดึงย้อนกลับ จากปลายด้านที่ไม่มีกาวบนปลายของแต่ละแถบเพื่อแกะรอย พันออกจากสายให้อาหาร

ดึงแผ่นสายให้อาหารย้อนไปทางด้านบนเพียงเบา ๆ ต่อไป เพื่อถอดออกจากจมูกผู้ป่วย

สำหรับใช้กับผู้ป่วยรายเดียว ใช้แล้วทิ้ง

หากท่านต้องการชมวิดีโอเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ กรุณาไปที่ www.dalemed.com

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของ Dale มีจำหน่ายที่โรงพยาบาล/สถานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของท่าน

ไม่ได้ผลิตจากยางลาเทกซ์ธรรมชาติ

Dale® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dale Medical Products, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

โทรศัพท์: +1-508-695-9316

www.dalemed.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Germany

