
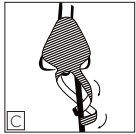


# Dale®

## Nazogastrik Tüp Tutucu

### Uygulama Talimatı

1. NG Tüp yerleştirildikten sonra burnun ve NG tüpün hem temiz hem de kuru olduğundan emin olun. Hastane protokolü uyarınca temizlemenizi öneririz.
2. NG tüp tutucuyu burun pedinin üstünden başlayarak astandan ayırın.(A)
3. Burun pedini, NG tüpün yerleştirildiği burun deliğine doğru hafif bir açıyla koyup uygulayın. (B)
4. Tüpe en yakın olan şeridi seçin ve NG tüpün büyük kısmının seçilen burun deliği üzerinde ortalanması için spiral bir şekilde sarmaya başlayın.(C)
5. Şeridin geri kalan kısmını aynı spiral tekniği kullanarak sarın.(C)
6. Tüp tutucuyu 3 gün sonra veya gerekirse daha erken değiştirin.

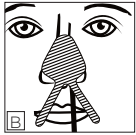

### Tüpü çıkarma

NG tüp tutucuyu hastadan çıkarmak için şeritleri açmak üzere her bir şeridin ucundaki yapışkan olmayan uçları geri çekmeniz yeterlidir.

Tüp tutucuyu hastanın burnundan çıkarmak için yukarı doğru hafifçe çekmeye devam edin.

**For single patient use. Disposable.**

Uygulama videosu için lütfen [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com) web sitesine gidiniz.

Dale tıbbi ürünleri tercih ettiğiniz hastane/tıbbi malzeme tedarikçilerinden sağlanabilir.

**Doğal kauçuk lateksle üretilmemiştir.**

Dale®, ABD ve AB'de Dale Medical Products, Inc.'in tescilli bir ticari markasıdır.

TEL.: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Almanya

