


Dale®

Držáky tracheostomické trubičky

Návod k aplikaci

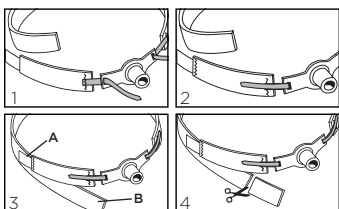

1. Provlékněte dlouhé úzké upevňovací pásky přes obruby tracheostomické trubičky.
2. Přehněte pásky zpět přes obrubu a připevněte je k manžetě.
3. Zajistěte upevňovací pásku kratšího dílu manžety **(A)** k delšímu dílu **(B)**. Nastavte potřebnou délku nebo kompresi.
4. Přebytný materiál **(B pouze díl)** zastříhnete na patřičnou délku.

Upozornění

Výrobek používejte pouze pod dohledem ošetřovatele. Provádějte kontrolu upevnění, aby nedošlo k nežádoucímu uvolnění manžety. Upevňovací pásky nezkracujte.

K použití pouze u jednoho pacienta. Na jedno použití.

Držák vyměňujte denně nebo podle potřeby častěji. Výměnu provádějte po koupeli pacienta.

Video s ukázkou aplikace najdete na webu www.dalemed.com

Zdravotnické potřeby Dale jsou dostupné u dealera s nemocničním/zdravotnickým materiálem podle vašeho výběru.

Neobsahuje přírodní latex.

Dale® je registrovaná ochranná známka společnosti Dale Medical Products, Inc. v USA a EU.

TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Německo

