


# Dale®

## Holder til trakealkanyle

### Anbringelse

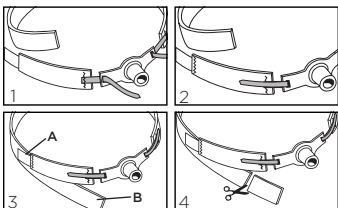

1. Før de lange, smalle klæbeflige gennem hullerne i trakealkanylens flange.
2. Buk fligene tilbage over flangen og fastgør dem til halsbåndet.
3. Klæbefligene på den korte del **(A)** af halsbåndet skal fastgøres på lange del **(B)**. Juster halsbåndet, så det sidder godt til.
4. Klip overskydende materiale **(kun B)** af.

### Forsigtig

Må kun anvendes i overvågede plejemiljøer. Kontrolleres jævnligt for at undgå, at holderen utilsigtet løsnes. Klæbefligene må ikke klippes til.

### Til brug til en enkelt patient. Til engangsbrug.

Udskift holderen dagligt eller oftere efter behov. Udskiftes efter patientvask.

Der ligger en video, der viser anbringelsen, på [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

Medicinske produkter fra Dale kan fås hos forhandlere af hospitalsudstyr/medicinsk udstyr.

### Fremstillet uden naturgummilatex.

Dale® er et registreret varemærke, der tilhører Dale Medical Products, Inc. i USA og EU.

TLF.: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Tyskland

