


Dale®

Houders voor tracheostomiecanules

Instructies voor het aan-

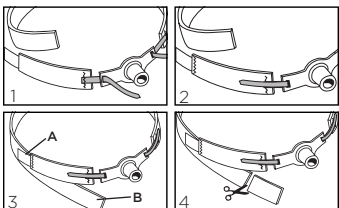

brenge

1. Rijg de lange, smalle bevestigingslipjes door de flenzen van het schildje.
2. Breng de lipjes terug over de flens en kleef ze aan de halsband.
3. Maak het bevestigingslipje van het korte gedeelte **(A)** vast aan het lange halsbandgedeelte **(B)**. Stel de band af op de gewenste lengte of druk.
4. Knip het overtollige materiaal **(B alleen)** op de juiste lengte af.

Let op

Alleen onder toezicht gebruiken. Waak erover dat het geheel niet per ongeluk losraakt. De bevestigingslipjes niet bijknippen.

Voor gebruik bij één patiënt. Disposable.

De houder dagelijks of zo nodig vaker vervangen. Vervangen na het wassen van de patiënt.

Een videofilmje over het aanbrengen van de houder vindt u op www.dalemed.com

De medische producten van Dale zijn verkrijgbaar bij uw voorkeursleverancier van ziekenhuis-/medische benodigdheden.

Niet vervaardigd met natuurrubberlatex.

Dale® is een gedeponeerd handelsmerk van Dale Medical Products, Inc. in de VS en de EU.

TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Duitsland

