


# Dale®

Trakeostoomakanyylin pidikkeet

## Käyttöohjeet

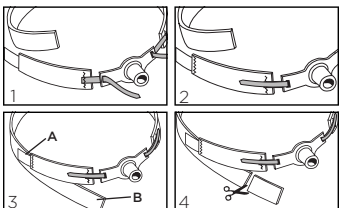

1. Pujota pitkät kapeat kiinnitysluskat trakeostoomalevyn kaulusten läpi..
2. Taivuta liuskat takaisin kauluksen yli ja kiinnitä kaulanauhaan.
3. Kiinnitä lyhyen osan **(A)** kiinnitysluska pitkään kaulanauhaosaan **(B)**. Säädä pituus tai puristus sopivaksi.
4. Leikkaa ylimääräinen materiaali **(vain B)** pois, niin että pituus on sopiva.

## Varoitus

Saa käyttää vain valvotussa hoitotilanteessa. Tarkkaile, ettei kiinnitys aukea vahingossa. Älä leikkaa kiinnitysluskoja.

### **Potilaskohtainen. Kertakäyttöinen.**

Vaihda pidike päivittäin tai tarvittaessa useammin. Vaihda potilaan pesun jälkeen.

Kiinnityksessä opastava video on katsottavissa osoitteessa [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

Dalen lääketieteellisiä tuotteita on saatavana lääketieteellisten ja sairaalatarvikkeiden myyjiltä.

**Ei ole valmistettu luonnonkumilateksista.**

Dale® on Dale Medical Products, Inc. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja EU:n alueella.

PUHELIN.: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Saksa

