


# Dale®

Fixations pour canule de trachéotomie

## Fixations pour canule de

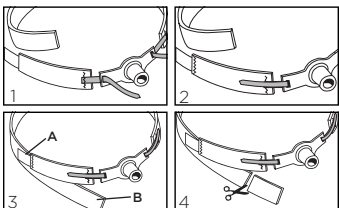

## trachéotomie

1. Faire passer les languettes d'attache longues et effilées à travers une bride de la plaque de trachéotomie.
2. Ramener les languettes en arrière, sur la bride, et les coller au collier.
3. Fixer la languette d'attache de la section courte **(A)** à la section longue du collier **(B)**. Régler à la longueur ou à la pression adaptée.
4. Couper l'excédent de tissu **(B uniquement)** pour obtenir la longueur adaptée.

## Attention

N'utiliser que si le patient est sous surveillance. Veiller à ce qu'un relâchement accidentel ne se produise pas. Ne pas couper les languettes d'attache.

### **Produit à usage unique. Jetable.**

Changer la fixation tous les jours ou plus souvent, selon les besoins. Changer après la toilette du patient.

Pour voir une démonstration en vidéo, rendez-vous sur : [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

Les produits médicaux Dale sont vendus par les distributeurs de fournitures médicales/à l'usage des hôpitaux.

### **Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel.**

Dale® est une marque déposée aux États-Unis et dans l'UE de Dale .

TÉL.: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Allemagne

