


Befestigungsanweisung

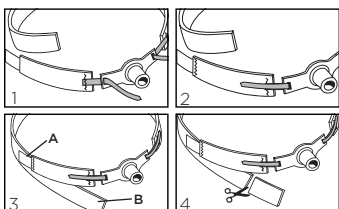

1. Die langen, schmalen Befestigungs-laschen durch die Flansche an der Tracheostomieplatte einlegen.
2. Die Laschen über den Flansch zurückbiegen und am Nackenband befestigen.
3. Die Befestigungslasche des kurzen Abschnitts **(A)** am langen Nackenbandabschnitt **(B)** befestigen. Für die richtige Länge und Kompression justieren.
4. Überschüssiges Material **(nur B)** auf die richtige Länge kürzen.

Vorsicht

Nur in einem beaufsichtigten Umfeld verwenden. Stets überwachen, um ein versehentliches Lösen zu verhindern. Befestigungslaschen nicht kürzen.

Nur für den Gebrauch an einem Patienten bestimmt. Einwegprodukt.

Halter täglich oder bei Bedarf auch häufiger wechseln. Nach dem Badegang des Patienten ebenfalls wechseln.

Ein Video der Anwendung finden Sie unter www.dalemed.com

Medizinische Produkte von Dale erhalten Sie von Ihrem bevorzugten Lieferanten für Krankenhausbedarf und medizinische Produkte.

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.

Dale® ist eine eingetragene Marke von Dale Medical Products, Inc. in den USA und der EU.

TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Deutschland

