


Dale®

Υποδοχές σωλήνα τραχειοστομίας

Οδηγίες Εφαρμογής

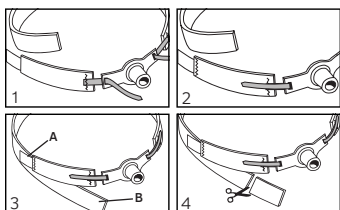

1. Περάστε τα μακρά και στενά συνδετικά πτερύγια μέσα από τις φλάντζες της πλάκας τραχειοστομίας.
2. Φέρτε τα πτερύγια προς τα πίσω, πάνω από τη φλάντζα, και συνδέστε τα στο περιλαίμιο.
3. Στερεώστε το συνδετικό πτερύγιο του βραχέος τμήματος **(A)** στο μακρύ τμήμα **(B)** του περιλαίμιου. Ρυθμίστε για να πετύχετε το κατάλληλο μήκος ή τη σωστή συμπίεση.
4. Κόψτε το περίσσιο υλικό **(μόνο το B)** για το κατάλληλο μήκος.

Προσοχή

Χρήση σε επιτηρούμενα κέντρα φροντίδας μόνο. Παρακολουθείτε για να αποφύγετε την αθέλητη αποσύνδεση. Μην κόβετε τα συνδετικά πτερύγια.

Για χρήση σε ένα μόνο ασθενή. Αναλώσιμο.

Αλλάζετε την υποδοχή καθημερινά ή πιο συχνά όπως χρειάζεται. Αλλάξτε το αφού κάνει μπάνιο ο/η ασθενής.

Για βίντεο σχετικά με την εφαρμογή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.dalemed.com

Τα ιατρικά προϊόντα της Dale διατίθενται από τους έγκριτους αντιπροσώπους τροφοδοσίας νοσοκομειακών / ιατρικών προϊόντων.

Δεν έχει κατασκευαστεί με φυσικό λατέξ.

Το Dale® είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Dale Medical Products, Inc. στις Η.Π.Α. και στην ΕΕ.

ΤΗΛ.: +1-508-695-9316

www.dalemed.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Γερμανία

