


Dale®

Tracheosztómias tubusrögzítők

Alkalmazási utasítások

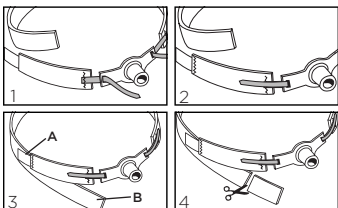

1. Fűzze át a hosszú, keskeny rögzítő füleket a légzőcső kiszélesedett laprészén.
2. Húzza a füleket a lap fölött vissza, és tapassza őket rá a nyakövre.
3. Erősítse a rövid rész **(A)** rögzítő fülét a hosszú nyaköv-részhez **(B)**. Igazítsa be, hogy megfelelő hosszúságú legyen, illetve hogy elég szoros legyen.
4. Vágja le a fölösleges részt **(csak a B-n)**, hogy az öv megfelelő hosszúságú legyen.

Vigyázat!

Csakis felügyelet alatt álló betegeken szabad használni. Tartsa megfigyelés alatt annak megelőzésére, hogy véletlenül kibomoljon. Ne vágjon bele a rögzítőfülekbe.

Egyetlen betegen való alkalmazásra. Eldobható.

Naponta, vagy szükség szerint gyakrabban cserélje a tartópántot. A beteg fürdetése után cserélje le.

Az alkalmazást bemutató videóért látogasson el a www.dalemed.com webhelyre

A Dale gyógyászati termékek beszerezhetők a megszokott kórházi/gyógyászati felszereléseket szállító forgalmazójától.

Nem természetes latex gumiból készült.

A Dale® a Dale Medical Products, Inc. bejegyzett védjegye az USA-ban és az EU-ban.

TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Németország

