


Dale®

気管支切開カニューレホルダー

使用方法

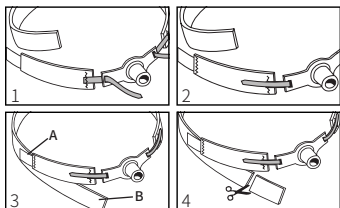

1. 気管支切開カニューレのフランジの孔に細長いファスナータブを通します。
2. タブを折り返してネックバンドに貼り付けます。
3. 短い部分(A)のファスナータブを長いネックバンドの部分(B)に固定します。適切な長さで圧迫感のないように調整して下さい。
4. 余ったバンド部分(Bのみ)を適切な長さに切ります。

注意

医療専門家の監督下で使用して下さい。知らないうちにホルダーが外れないよう、注意して下さい。ファスナーのタブを切らないで下さい。

患者一人のみにご使用下さい。使い捨て。

ホルダーは毎日一回又は必要に応じ複数回交換して下さい。患者の入浴後に交換して下さい。

使用方法のビデオはこちらからご視聴いただけます。www.dalemed.com

デイルの医療品は優先病院/医療品供給ディーラーよりお求め下さい。

天然ゴムラテックスは含まれておりません。

Dale® は、米国及び欧州 Dale Medical Products, Inc.の登録商標です。

TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Germany

