


Dale®

Holder for trakealkanyle

Påsettingsanvisninger

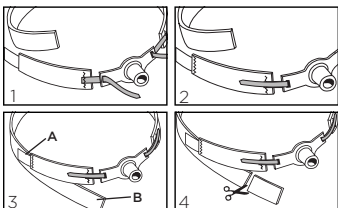

1. Tre de lange, smale festeflikene gjennom åpningene i halsplaten.
2. Før flikene tilbake igjen over åpningene, og fest dem til halsremmen.
3. Fest festefliken på den korte delen **(A)** til den lange delen av halsremmen **(B)**. Juster lengden eller strammingen, slik at den blir riktig.
4. Klipp vekk overflødig materiale **(bare B)**, slik at lengden blir riktig.

Obs!

Skal bare brukes under tilsyn. Overvåk for å hindre at produktet løsner. Klipp ikke av festeflikene.

Skal bare brukes på én pasient. Til engangsbruk.

Bytt holderen hver dag eller oftere ved behov. Bytt etter at pasienten har badet.

Du finner en påsettingsvideo på www.dalemed.com

Medisinske produkter fra Dale fås hos forhandlere av sykehusutstyr / medisinske produkter.

Produsert uten lateks av naturgummi.

Dale® er et registrert varemerke som tilhører Dale Medical Products, Inc. i USA og EU.

Tlf.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Tyskland

