


Dale®

Suportes para tubos de traqueostomia

Instruções de aplicação

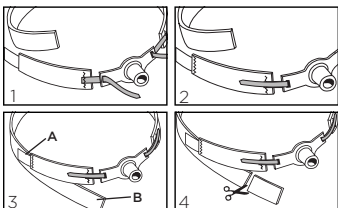

1. Enfie as presilhas de aperto compridas e estreitas através das flanges na placa que cobre a traqueia.
2. Passe as presilhas sobre a flange e prenda à cinta de fixação.
3. Prenda a presilha de aperto da secção curta **(A)** à secção comprida **(B)** da cinta de fixação. Regule para obter o comprimento ou a compressão apropriado(a).
4. Apare o material em excesso (**apenas B**) para obter o comprimento adequado.

Atenção

Utilizar apenas em instalações de cuidado de saúde com supervisão. Controlar para evitar o desengate inadvertido. Não apare as presilhas de aperto.

Para a utilização num único doente. Descartável.

Troque o suporte todos os dias ou com mais frequência, se necessário. Troque após o banho do doente.

Para ver um vídeo sobre a aplicação, aceda www.dalemed.com

Os produtos médicos da Dale estão disponíveis junto do seu representante preferido de produtos hospitalares/médicos.

Não fabricado com látex de borracha natural.

Dale® é marca registada da Dale Medical Products, Inc. nos EUA e na UE.

TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Alemanha

