


# Dale®

Hållare för trakeostomitub

## Anvisningar

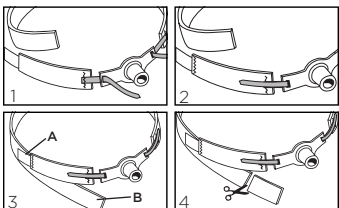

1. Trä de långa, smala fästflikarna genom flänsarna på trakeostomiplattan.
2. För flikarna tillbaka över flänsarna och fäst dem mot halsremmen.
3. Sätt fast den korta halsremsdelens fästflik (**A**) på den långa halsremsdelen (**B**). Justera till korrekt längd eller kompression.
4. Klipp av överflödigt material (**endast på B**) så att längden blir korrekt.

## Obs!

Ska endast användas i vårdmiljö med övervakning. Övervaka produkten så att oavsiktlig lossning förhindras. Trimma inte fästflikarna.

### **För användning till en enstaka patient. Engångsprodukt.**

Byt hållaren dagligen eller oftare om så krävs. Byt hållaren efter att patienten badat.

För att se en video som visar hur produkten appliceras, besök [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

Dale medicinska produkter fås från försäljare av sjukhus-/medicinska produkter.

### **Ej tillverkad med naturgummilatex.**

Dale® är ett registrerat varumärke som tillhör Dale Medical Products, Inc. i USA och EU.

TEL.: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Tyskland

