


Dale®

อุปกรณ์ยึดท่อช่วยหายใจ

วิธีการใช้งาน

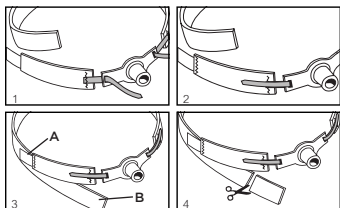

1. สอดแถบรัดผ่านรูด้านข้างฐานจากด้านปลายยาวและแคบของแถบรัดของท่อช่วยหายใจ
2. ดึงแถบรัดวกกลับมาเหนือรูและยึดเข้ากับห่วงยึดคอก
3. ยึดแถบรัดด้านสั้น (A) เข้ากับด้านยาวของห่วงยึดคอก (B) ปรับความยาวหรือความตึงกระชับให้เหมาะสม
4. ตัดวัสดุส่วนที่เกิน (เฉพาะส่วน B เท่านั้น)ทิ้งไปให้เหลือแต่ความยาวที่เหมาะสม

ข้อควรระวัง

ควรใช้ภายใต้การดูแลที่จัดเอาไว้เท่านั้น ควรนำสังเกตเพื่อป้องกันอุปกรณ์หลุดโดยบังเอิญ

อย่าตัดแถบรัดส่วนเกาะเกี่ยว

สำหรับใช้กับผู้ป่วยคนเดียว ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

เปลี่ยนอุปกรณ์ยึดท่อช่วยหายใจวันละครั้งหรือน้อยกว่าตามกึ่งกลางเป็น เปลี่ยนหลังจากผู้ป่วยขานปาก

สำหรับวิดีโอแสดงวิธีการใช้ โปรดไปที่ www.dalemed.com

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของ Dale มีจำหน่ายที่โรงพยาบาลผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันท่วงที

ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทำจากยางลาเทกซ์ธรรมชาติ

Dale® คือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dale Medical Products, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

โทรศัพท์: +1-508-695-9316

www.dalemed.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Germany

