


Dale®

Trakeostomi Kanülü Tutucuları

Uygulama Talimatı

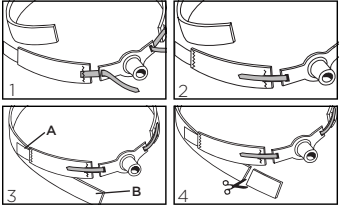

1. Uzun ve ince tutturucu şeritleri trakeal plakadaki kanatlardan geçirin.
2. Şeritleri kanat üzerinden geri getirip boyun bandına tutturun.
3. Kısa kısmın **(A)** şeridini uzun boyun bandı kısmına **(B)** sabitleyin. Uygun uzunluğa ve sıklığa ayarlayın.
4. Uygun uzunluk elde etmek için fazla materyali kısaltın **(sadece B)**.

Dikkat

Sadece gözetim altındaki bakım ortamlarında kullanın. Kazayla yerinden çıkmasını önlemek için izleyin. Tutturucu şeritlerini kısaltmayın.

Tek hastada kullanılmak içindir. Tek kullanımlıktır.

Tutucuyu her gün veya gerekirse daha sık değiştirin. Hasta banyo yaptıktan sonra değiştirin.

Uygulama videosu için lütfen www.dalemed.com adresini ziyaret edin.

Dale medikal ürünlerini tercih ettiğiniz hastane/tıbbi malzeme satıcısından temin edebilirsiniz.

Doğal kauçuk lateks içermez.

Dale®, Dale Medical Products, Inc.'in ABD ve AB'de tescilli bir ticari markasıdır.

TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Almanya

