


## Podkladová náplast

### Pokyny k použití

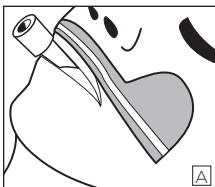

V zájmu předcházení ulcerace kůže a kožních trhlinek zkontrolujte před aplikací kůži a zdravotní stav pacienta. Monitorujte denně nebo častěji.

1. Aplikujte bariérový film.
2. Sejměte ochrannou fólii a umístěte podkladovou náplast na požadované místo **(A-D)**. Zkraťte podle potřeby.

Podkladovou náplast vyměňujte po třech dnech, případně dříve, je-li to nutné.

### Odstranění

Podkladovou náplast odstraňujte jemně, aby se předešlo poranění kůže.

Video s ukázkou aplikace najdete na webu [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

**K použití pouze u jednoho pacienta. Na jedno použití.**

**Vyrobeno bez použití přírodního latexu.**

Dale® je registrovaná ochranná známka společnosti Dale Medical Products, Inc. v USA a EU.

TEL.: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Německo

