



Klæbebund

Anbringelse

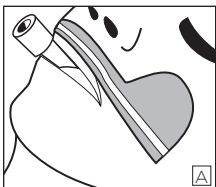

 Patientens hud og medicinske tilstand skal vurderes inden anbringelse for at forhindre ulceration eller ruptur af huden. Tilses dagligt eller oftere.

1. Smør hudplejeprodukt på.
2. Tag papiret af klæbebunden og anbring den på det ønskede sted **(A-D)**. Klip til efter behov.

Udskift klæbebunden efter 3 dage eller før, hvis det er nødvendigt.

Aftagning

Klæbebunden skal tages forsigtigt af for at undgå hudtraume.

Der ligger en video, der viser anbringelsen, på www.dalemed.com

Til brug til en enkelt patient. Til engangsbrug.

Fremstillet uden naturgummilatex.

Dale® er et registreret varemærke, der tilhører Dale Medical Products, Inc. i USA og EU.

TLF.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Tyskland

