



## Instructies voor het aanbrengen

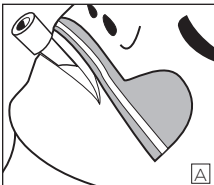

 Om verzwering of scheuren van de huid te voorkomen, dient u de huid en de medische gesteldheid van de patiënt te beoordelen alvorens het product aan te brengen. Voer dagelijks of vaker een controle uit.

1. Gebruik een huidbeschermingsdoekje om bescherming op de huid aan te brengen.
2. Verwijder de steunlaag en breng de klevende basis op de gewenste plaats aan **(A-D)**. Zo nodig bijknippen.

Verwissel de basis na 3 dagen of zo nodig sneller.

## Verwijderen

De klevende basis moet voorzichtig worden verwijderd om beschadiging van de huid te voorkomen.

Een videofilmje over het aanbrengen vindt u op [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

**Uitsluitend voor gebruik bij één patiënt. Disposable.**

**Niet vervaardigd met natuurrubberlatex.**

Dale® is een gedeponeerd handelsmerk van Dale Medical Products, Inc. in de VS en de EU.

TEL.: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Duitsland

