


Tarttuva alusta

## Käyttöohjeet

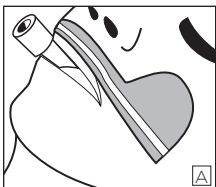

Arvioi  
potilaan iho

ja terveydentila  
ennen kiinnittämistä  
haavaumien ja ihon  
repeämisen estämiseksi. Seuraa  
päivittäin tai useammin.

1. Valmistele iho ihonsuoja-aineella.
2. Irrota taustapaperi ja aseta tarttuva alusta haluttuun kohtaan **(A-D)**. Leikkaa tarpeen mukaan.

Vaihda alusta 3 päivän jälkeen tai tarpeen mukaan aiemmin.

## Poistaminen

Tarttuva alusta tulee irrottaa varovasti, jotta iho ei vahingoitu.

Kiinnityksessä opastava video on katsottavissa osoitteessa [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com).

**Potilaskohtainen. Kertakäyttöinen.**

**Ei ole valmistettu luonnonkumilateksista.**

Dale® on Dale Medical Products, Inc. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja EU:n alueella.

PUHELIN: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Saksa

