


Base adhésive

## Instructions pour l'application

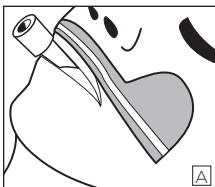

Pour éviter l'ulcération ou le déchirement de la peau, faites une évaluation de la peau du patient et de son état médical avant l'application. Surveillez quotidiennement ou plus souvent.

1. Appliquez une solution de préparation de la peau.
2. Retirez la bande antiadhésive et placez la Base adhésive à l'endroit désiré **(A-D)**. Coupez suivant les besoins.

Changez la base au bout de trois jours, ou plus tôt si nécessaire.

## Retrait

Retirez délicatement l'adhésif pour ne pas risquer de traumatiser la peau.

Pour visionner une démonstration de l'application, veuillez vous rendre sur le site [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

**À usage unique. Jetable.**

**Fabriquée sans latex de caoutchouc naturel.**

Dale® est une marque déposée de Dale Medical Products, Inc. aux É.-U et dans l'U.E.

TÉL.: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Allemagne

