


Klebestreifen

Anwendung

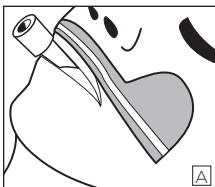

Zur Vermeidung von

Hautulzerationen

oder Hautrissen sind

die Haut und der

Gesundheitszustand des Patienten

vor Anbringen dieses Produkts zu

beurteilen. Täglich oder ggf. auch

häufiger prüfen.

1. Hautpräparation auftragen.
2. Schutzstreifen abziehen und Klebestreifen auf die gewünschte Stelle platzieren **(A-D)**. Nach Bedarf zuschneiden.

Klebestreifen nach 3 Tagen oder ggf. früher wechseln.

Entfernen

Klebestreifen vorsichtig abziehen, um Hautverletzungen zu vermeiden.

Ein Anwendungsvideo finden Sie unter www.dalemed.com

Nur für den Gebrauch an einem einzelnen Patienten bestimmt. Einwegprodukt.

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.

Dale® ist eine eingetragene Marke von Dale Medical Products, Inc. in den USA und in der EU.

TEL.: +1-508-695-9316

www.dalemed.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Deutschland

