


Ragasztós tartóaljzat

Alkalmazási utasítások

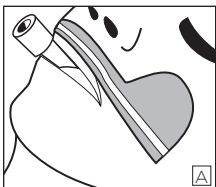

A bőr elfekélyesedésének vagy beszakadásának elkerülése érdekében

mérje fel a beteg bőrének állapotát, valamint a beteg egészségügyi állapotát, mielőtt a tartószalagot felhelyezné. Naponta vagy ennél gyakrabban ellenőrizze a beteg bőrének állapotát.

1. Helyezzen fel bőrvédő kendőt.
2. Távolítsa el a védőszalagot, és helyezze a ragasztós tartóaljzatot a kívánt helyre **(A-D)**. Vágjon le belőle, ha szükséges.

Három nap múltán cserélje le az aljzatot, vagy gyakrabban, ha szükséges.

Eltávolítás

A bőrtrauma elkerülésének érdekében óvatosan kell eltávolítani a ragasztószalagot.

Az alkalmazást bemutató videóért látogasson el a www.dalemed.com webhelyre.

**Egyetlen betegen való alkalmazásra.
Eldobható.**

Nem természetes latex gumiból készült.

A Dale® a Dale Medical Products, Inc. bejegyzett védjegye az USA-ban és az EU-ban.

TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Németország

