


Base adesiva

## Istruzioni per l'applicazione

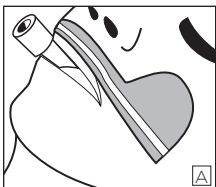

Per evitare le ulcerazioni o le lacerazioni cutanee, valutare la pelle e le condizioni mediche

del paziente prima dell'applicazione.

Monitorare ogni giorno o con maggiore frequenza.

1. Applicare il preparato di protezione della pelle.
2. Rimuovere il rivestimento e posizionare opportunamente la base adesiva (**posizione A-D**). Rifilare secondo le necessità.

Cambiare base dopo 3 giorni o prima se necessario.

## Rimozione

Rimuovere con cura l'adesivo in modo da evitare di traumatizzare la pelle.

Per visionare un video dimostrativo dell'applicazione, visitare [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com).

**Monouso. Da usarsi su un solo paziente.**

**Non prodotto con lattice di gomma naturale.**

Dale® è un marchio depositato di Dale Medical Products, Inc. negli USA e nell'UE.

TEL.: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Germania

