



粘着ベース

使用方法

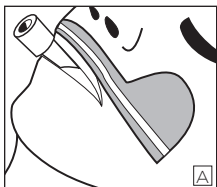

 皮膚潰瘍または皮膚への損傷を避けるため、使用前に患者の皮膚の状態および健康状態を確認します。最低1日1回は確認してください。

1. 肌に準備薬を塗ります。
2. ライナーを剥がし、粘着ベースを適切な部位に貼り付けます (A-D)。必要な場合は余分な箇所を切り取ります。

ベースは3日以内または必要な場合はもっと早く交換してください。

取り外し

皮膚に損傷を与えないよう、気をつけて粘着テープを取り外してください。

取扱説明ビデオは、www.dalemed.comでご覧になれます。

一人の患者のみに使用。使い捨て用。

天然ゴムラテックスは含まれておりません。

Dale®は、米国および欧州Dale Medical Products, Inc.の商標登録です。

TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Germany

