


Klebeplate

Påsettingsanvisninger

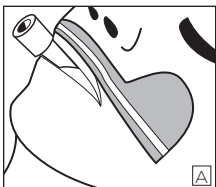

 Forebygg sår og rifter i huden ved å evaluere pasientens hud og helsetilstand før påsetting. Overvåk daglig eller oftere.

1. Påfør hudprepareringsmiddel.
2. Fjern dekkpapiret, og legg klebeplaten på det aktuelle stedet (A-D). Beskjær etter behov.

Bytt klebeplaten etter 3 dager, eller tidligere hvis det er nødvendig.

Fjerning

Klebeplaten skal fjernes forsiktig for å unngå hudtraume.

Du finner en video om påsetting på www.dalemed.com

Skal bare brukes på én pasient. Til engangsbruk.

Produsert uten lateks av naturgummi.

Dale® er et registrert varemerke som tilhører Dale Medical Products, Inc. i USA og EU.

Tlf.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Tyskland

