


Base Adesiva

## Instruções de aplicação

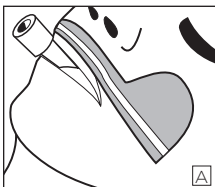

A fim de evitar ulcerações ou lacerações cutâneas, avalie a pele e as condições médicas do

paciente antes da aplicação. Monitore diariamente ou com mais frequência.

1. Aplique o preparado para a pele.
2. Remova o protector e posicione a Base Adesiva no local desejado **(A-D)**. Corte o excesso na medida necessária.

Troque a base depois de 3 dias, ou menos se necessário.

## Remoção

O adesivo deve ser removido com cuidado para evitar trauma à pele.

Para ver um vídeo sobre a aplicação, acesse [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

**Para a utilização num único doente.  
Descartável.**

**Não fabricado com látex de borracha natural.**

Dale® é marca registada da Dale Medical Products, Inc. nos EUA e na UE.

TEL.: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Alemanha

