


Base adhesiva

Instrucciones de aplicación

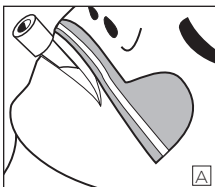

Para prevenir úlceras o laceraciones cutáneas, evalúe la piel y las afecciones médicas del

paciente antes de aplicar el producto. Inspeccione por lo menos una vez por día.

1. Aplique el producto de preparación de la piel.
2. Quite el revestimiento y coloque la base adhesiva en el lugar deseado **(A-D)**. Recórtela según sea necesario.

Cambie la base al cabo de 3 días o antes si fuera necesario.

Cómo retirar

Despegue el producto adhesivo cuidadosamente para no lesionar la piel.

Para ver un video sobre cómo colocar el dispositivo, visite www.dalemed.com

**Para utilizar en un solo paciente.
Desechable.**

Fabricado sin látex de goma natural.

Dale® es una marca comercial registrada de Dale Medical Products, Inc. en los EE.UU. y la UE.

TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Alemania

