


Självhäftande bas

Appliceringsanvisningar

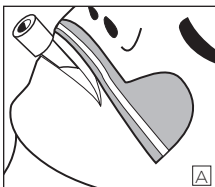

Bedöm patientens hud och medicinska tillstånd före applicering, så att hudsår eller hudrifter undviks. Övervaka området en gång per dag eller oftare.

1. Applicera en hudbarriärprodukt.
2. Ta av skyddspapperet och placera den självhäftande basen på önskad plats **(A-D)**. Trimma efter behov.

Byt ut basen efter tre dagar eller tidigare om så behövs.

Borttagning

Den självhäftande basen ska tas av försiktigt så att huden inte skadas.

För att se en appliceringsvideo, gå till www.dalemed.com

**För användning till en enstaka patient.
Engångsprodukt.**

Ej tillverkad med naturgummilatex.

Dale® är ett registrerat varumärke som tillhör Dale Medical Products, Inc. i USA och EU.

TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Tyskland

