



ฐานติดผิว

วิธีการใช้งาน

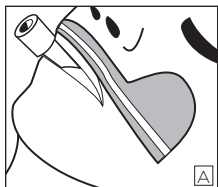

 เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดแผลเปื่อยที่ผิวหนัง หรือผิวหนังฉีกขาด ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์โปรดตรวจสอบสภาพผิวของผู้ป่วยและอาการอื่น ๆ ทางกายภาพ นอกจากนี้ให้ติดตามคุณภาพการใช้งานทุกวันหรือให้บ่อยขึ้น

1. เช็ดผิวหนังด้วยผลิตภัณฑ์เคลือบผิวหนัง
2. ลอกวัสดุชั้นฐานติดผิวออกและวางลงในจุดที่ต้องการ (A-D) ตัดแต่งขอบตามที่จำเป็น

เปลี่ยนฐานหลังใช้แล้ว 3 วัน หรือเร็วกว่านั้นหากจำเป็น

การถอดออก

ลอกฐานติดผิวด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่ผิวหนัง

หากท่านต้องการชมวิดีโอเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ กรุณาไปที่ www.dalemed.com

สำหรับใช้กับผู้ป่วยรายเดียว ใช้แล้วทิ้ง

ไม่ได้ผลิตจากยางลาเท็กซ์ธรรมชาติ

Dale® เป็นเครื่องหมายจดทะเบียนการค้าของ Dale Medical Products, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

โทรศัพท์: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Germany

