


## Uygulama Talimatı

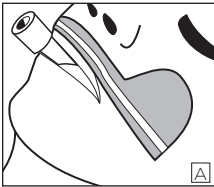

Cilt  
ülserasyonlarını  
veya ciltte açılmayı  
önlmek için uygulama  
öncesinde hastanın

cilt durumunu ve genel durumunu  
değerlendirin. Günlük olarak veya daha  
sık kontrol edin.

1. Cilt hazırlık amaçlı ıslak mendil  
uygulayın.
2. Lineri çıkarın ve Yapışkan Tabanı  
istenen konuma yerleştirin **(A-D)**.  
Gerektiği şekilde kısaltın.

Tabanı 3 günden sonra veya gerekirse daha  
erken değiştirin.

## Çıkarma

Cilt travmasını önlemek için yapışkan  
dikkatle çıkarılmalıdır.

Uygulama videosu için lütfen [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)  
adresini ziyaret edin

**Tek hastada kullanılmak üzere üretilmiştir.**  
**Tek kullanımlıktır.**

**Doğal kauçuk lateks içermez.**

Dale®, ABD ve AB'de Dale Medical Products, Inc.'in  
tescilli bir ticari markasıdır.

TEL.: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Almanya

