







# Dale®

## Hold-n-Place®

Stehenní pásek pro Foleyův katetr

### Aplikace stehenního pásku

1. Obtočte pásek kolem pacientova stehna, produktovým štítkem Dale na vnitřní stranu nohy. Napněte umístěný pásek a zapněte suchý zip. Správného stlačení je dosaženo, pokud lze pod páskem pohodlně prostrčit dva prsty.
2. Umístěte Foleyův katetr přes bílé šití zelené chlopně. Ponechte dostatečnou délku katetru nad stehenním páskem, aby nebyl vyvíjen tah na močový měchýř nebo napnutím vyvíjíte tah, je-li to potřeba.
3. Když je katetr v požadované poloze, prostrčte úzkou zelenou chlopeň obdélníkovým otvorem přes katetr, aby se zelené chlopně překryly.
4. Upevněte katetr tahem za zelené chlopně v protichůdném směru. Upevněte chlopně. Posun katetru: odepněte jednu zelenou chlopeň, upravte polohu katetru a chlopně znovu upevněte.
5. Další způsob zajištění je umístit do upevňovacího zařízení proximální konec Y-portu katetru.

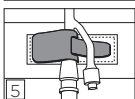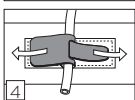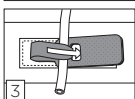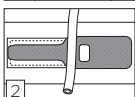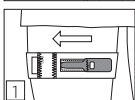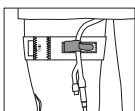

### Aplikace břišního pásku

1. Chcete-li upevnit katetr, obtočte břišní pásek kolem břicha nad ránou. Není nutné holení. Zelenou chlopeň pro upevnění katetru je třeba vystředit nad místo vývodu. Po umístění pásku přitlačte upevňovací chlopně k břišnímu pásku.
2. Umístěte katetr přes bílé šití zelené chlopně.
3. Opakujte výše uvedené kroky 3, 4 a 5.

### Další výhody

V zájmu předcházení meatálnímu podráždění lze stehenní pásek pootočit oběma směry. Zvýšit komfort pacienta lze rovněž pravidelným střídáním nohou.

**K použití pouze u jednoho pacienta. Na jedno použití.**

Video s ukázkou aplikace najdete na webu [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

Medicínské produkty Dale jsou dostupné od vašeho dodavatele nemocničních/medicínských produktů.

**Vyrobeno bez použití přírodního latexu.**

Dale® a Hold-n-Place® jsou registrované ochranné známky společnosti Dale Medical Products, Inc. v USA.

TEL.: +1-508-695-9316

[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Německo

