
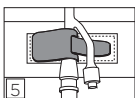
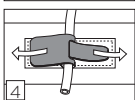
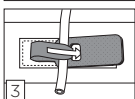
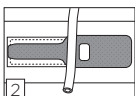
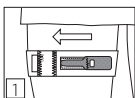


Dale®

Hold-n-Place® Benbånd til Foley-kateter

Påsætning af benbåndet

1. Sæt benbåndet højt oppe om patientens lår med Dale-etiketten vendt mod indersiden af benet. Stram benbåndet til, så det sidder fast, og luk burrebåndet. Båndet er korrekt strammet, når der kan være to fingre under det.
2. Læg Foley-kateteret over de hvide sting på den grønne strop. Sørg for, at der er en tilstrækkeligt stor løkke på kateteret for at undgå traktion af blæren. Kateteret kan også strammes mhp. traktion efter behov.
3. Når kateteret er i den ønskede position, føres den smalle, grønne strop over kateteret og gennem den firkantede åbning, så de grønne stropper lapper over hinanden.
4. Lås kateteret fast ved at trække de grønne stropper i hver sin retning. Fastgør stropperne. Hvis kateteret skal omplaceres: Løft en af de grønne stropper, juster kateterets placering, og fastgør stroppen igen.
5. En anden måde at fastgøre kateteret på er at sætte Y-porten i kateterets proksimale ende fast i låsemekanismen.

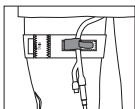

Påsætning af taljebåndet

1. Læg taljebåndet rundt om maven, over såret, for at fastgøre kateteret. Barbering er ikke nødvendig. Den grønne kateterlåsestropp skal være centreret over drænstedet. Når båndet er anbragt korrekt, fastgøres låsestroppen på taljebåndet.
2. Læg kateteret over de hvide sting på den grønne strop.
3. Gentag trin 3, 4 og 5 ovenfor.

Ekstra fordele

Benbåndet kan drejes i begge retninger for at undgå irritation af meatus. Patientkomforten kan også forbedres, hvis der skiftes ben jævnligt.

Til brug til en enkelt patient. Til engangsbrug.

Der ligger en video, der viser anbringelsen, på www.dalemed.com.

Medicinske produkter fra Dale kan fås hos forhandlere af hospitalsudstyr/medicinsk udstyr.

Fremstillet uden naturgummilatex.

Dale® og Hold-n-Place® er registrerede varemærker, der tilhører Dale Medical Products, Inc. i USA.

TLF.: +1-508-695-9316

www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Tyskland

