
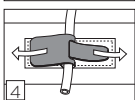
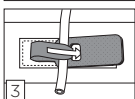
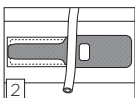
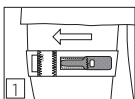


Dale®

Hold-n-Place® foley-katetrin jalkahihna

Jalkahihnan kiinnittäminen

1. Aseta jalkahihna ylös potilaan reiden ympärille niin, että Dale-tuotemerkintä on kohti jalan sisäsyryä. Venytä jalkahihna paikalleen ja kiinnitä se tarranauhakielekkeellä. Tiukkuus on sopiva, kun hihnan alle sopii mukavasti kaksi sormea.
2. Aseta foley-katetri vihreän kielekkeen valkoisen sauman päälle. Jätä riittävä lenkki katetria jalkahihnan yläpuolelle, jotta katetri ei vedä rakkoa, tai venytä katetria tarvittaessa vedon saamiseksi.
3. Kun katetri on halutulla paikalla, työnnä kapea vihreä kieleke katetrin yli ja neliskulmaisen aukon läpi niin, että vihreät kielekkeet tulevat päällekkäin.
4. Lukitse katetri paikalleen vetämällä vihreistä kielekkeistä vastakkaisiin suuntiin. Kiinnitä kielekkeet paikoilleen. Katetrin siirtäminen: nosta jompaakumpaa vihreää kielekettä, säädä katetria ja kiinnitä kieleke uudelleen.
5. Kiinnitys voidaan tehdä myös asettamalla katetrin proksimaalipäässä oleva Y-portti lukitusvälineeseen..

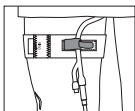

Vyötäröhihnan kiinnittäminen

1. Kun haluat kiinnittää katetrin paikalleen, aseta vyötäröhihna alaruumiin ympäri haavakohtaan yläpuolelle. Karvoitusta ei tarvitse poistaa. Katetrin vihreä lukituskieleke tulee keskittää dreneerauskohtaan päälle. Kun vyötäröhihna on paikallaan, paina lukituskieleke hihnaan.
2. Aseta katetri vihreän kielekkeen valkoisen sauman päälle.
3. Toista yllä olevat vaiheet 3, 4 ja 5.

Lisäetuja

Ulkoaukon ärsytyksen estämiseksi jalkahihnaa voidaan kääntää kumpaan tahansa suuntaan. Myös kiinnitysjalan vaihtaminen ajoittain voi lisätä käyttömukavuutta.

Potilaskohtainen. Kertakäyttöinen.

Kiinnityksessä opastava video on katsottavissa osoitteessa www.dalemed.com.

Dalen lääketieteellisiä tuotteita on saatavana lääketieteellisten ja sairaalatarvikkeiden myyjiltä.

Ei ole valmistettu luonnonkumilateksista.

Dale® ja Hold-n-Place® ovat Dale Medical Products, Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa.

PUHELIN: +1-508-695-9316

www.dalemed.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Saksa

