
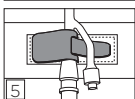
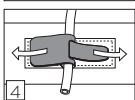
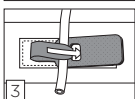
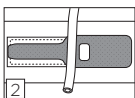
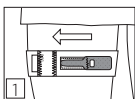


Dale®

Hold-n-Place® Foley-Katheter-Beinriemen

Anwendung des Beinriemens

1. Beinriemen oben um den Oberschenkel des Patienten legen, wobei das Dale-Produktetikett zur Beininnenseite zeigt. Beinriemen in Position ziehen und mit Klettverschluss sichern. Der richtige Druck liegt an, wenn gerade noch zwei Finger zwischen Beinriemen und Bein passen.
2. Foley-Katheter über die weiße Naht der grünen Lasche legen. Katheter über dem Beinriemen in eine Schlaufe legen, um eine Zugbelastung der Blase zu verhindern. Alternativ kann der Katheter bei Bedarf auch angezogen werden.
3. Wenn sich der Katheter in der gewünschten Position befindet, die schmale grüne Lasche über den Katheter durch die viereckige Öffnung schieben, sodass die grüne Lasche sich überlappt.
4. Katheter durch Ziehen der grünen Laschen in entgegengesetzte Richtung in Position sichern. Laschen andrücken. Zur Repositionierung des Katheters eine der grünen Laschen anheben, Katheter justieren und Lasche wieder anbringen.
5. Der Y-Anschluss des proximalen Katheterendes kann zur Befestigung auch in die Sicherungsvorrichtung eingebracht werden.

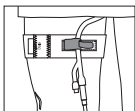

Anwendung des Hüftriemens

1. Hüftriemen über dem Situs um den Bauch legen, um den Katheter in Position zu bringen. Die Stelle muss nicht rasiert werden. Die grüne Kathetersicherungslasche sollte mittig über der Drainagestelle ausgerichtet werden. Wenn das Band in Position gebracht ist, die Sicherungslasche auf das Hüftband drücken.
2. Katheter über die weiße Naht der grünen Lasche legen.
3. Schritte 3, 4 und 5 oben wiederholen.

Zusätzliche Vorteile

Der Beinriemen kann in beide Richtungen gedreht werden, um eine Meatusreizung zu verhindern. Der Beinriemen kann abwechselnd an einem und dann wieder an dem anderen Bein angebracht werden, um den Tragekomfort zu erhöhen.

**Nur für den Gebrauch an einem Patienten bestimmt.
Einwegprodukt.**

Ein Video der Anwendung finden Sie unter www.dalemed.com
Medizinische Produkte von Dale erhalten Sie von Ihrem bevorzugten Lieferanten für Krankenhausbedarf und medizinische Produkte.

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.

Dale® und Hold-n-Place® sind eingetragene Marken von Dale Medical Products, Inc. in den USA.

TEL.: +1-508-695-9316

www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Deutschland

