
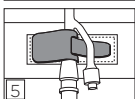
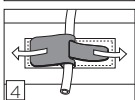
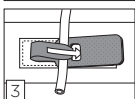
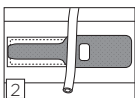
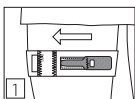


# Dale®

## Hold-n-Place® Foley-katéter lábszalagja

### Lábszalag alkalmazása

1. A lábszalagot helyezze magasan a beteg combja köré úgy, hogy a Dale termékcímke a láb belseje felé nézzen. Húzza a helyére a lábszalagot, és rögzítse a horogfület. Akkor megfelelő a kompresszió, ha két ujj szorosan befér a szalag alá.
2. Helyezze a Foley-katétert a zöld fül fehér varrata fölé. Elegendő nagyságú hurkot hagyjon a katéterben a lábszalag fölött ahhoz, hogy elkerülje a hólyagra gyakorolt húzást, illetve ha húzásra van szükség, akkor feszítse meg a katétert.
3. Amikor a katéter a kívánt helyzetben van, vezesse át a keskeny, zöld fület a katéter fölött a négyzet alakú nyíláson úgy, hogy a zöld fülek fedjék egymást.
4. A zöld fülek egymással ellentétes irányba való húzásával rögzítse a helyén a katétert. Rögzítse a helyükre a füleket. A katéter újrapozicionálása: emelje fel valamelyik zöld fület, igazítsa meg a katétert, majd ismét rögzítse a fület.
5. A rögzítés másik módja, hogy a katéter proximális végének Y-csatlakozását a zárószerkezetbe helyezi.

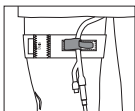

### Övszalag alkalmazása

1. A katéter rögzítéséhez az övszalagot helyezze a has köré, a sebhely fölött. Borotválás nem szükséges. A zöld katéterrögzítő fület a folyadékvezetési hely fölött középre kell helyezni. A szalag elhelyezése után nyomja rá a rögzítőfület az övszalagra.
2. Helyezze a katétert a zöld fül fehér varrata fölé.
3. Ismételje meg a fentiekben leírt 3., 4. és 5. Lépést.

### További előnyök

A bevezetési pont irritációjának megelőzése érdekében a lábszalag mindkét irányban elforgatható. A lábak időnkénti váltogatása szintén növelheti a beteg kényelmét.

#### Egyetlen betegen való alkalmazásra. Eldobható.

Az alkalmazást bemutató videóért látogasson el a [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com) webhelyre.

A Dale® gyógyászati termékek elérhetők a kedvelt kórházi-/gyógyászatieszköz-forgalmazójától.

#### Nem természetes latex gumiból készült.

A Dale® és a Hold-n-Place® a Dale Medical Products, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban.

TEL.: +1-508-695-9316

[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Németország

