
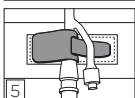
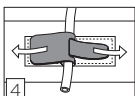
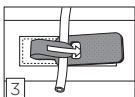
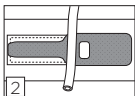
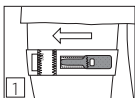


# Dale®

## Hold-n-Place® 폴리 카테터 다리 밴드

### 다리 밴드 착용 방법

1. Dale 제품 라벨이 다리 안쪽을 향하도록 하면서 다리 밴드를 환자의 허벅다리 주위에 높게 위치시키십시오. 다리 밴드를 제자리에서 잡아 늘려서 후크 탭을 잠그십시오. 밴드 아래에 두 손가락을 넣어서 편안하게 맞으면 적절한 압박이 이루어진 것입니다.
2. 폴리 카테터를 녹색 탭의 백색 바늘땀 줄 위에 두십시오. 방광 당김을 방지하기 위해, 또는 필요 시 카테터를 잡아 늘려서 당기기 위해 다리 밴드 위에 충분한 크기의 카테터 고리를 놓아두십시오.
3. 카테터를 원하는 위치에 두고, 좁은 녹색 탭을 카테터 위로 사각 구멍을 통해 삽입하여 녹색 탭들이 겹쳐지게 하십시오.
4. 녹색 탭들을 반대 방향으로 잡아당겨서 카테터가 제자리에 잠기게 하십시오. 탭들을 제자리에 고정시키십시오. 카테터 위치 조정법: 녹색 탭들 중 하나를 올려서, 카테터를 조절한 다음 탭을 다시 고정시키십시오.
5. 또 하나의 고정 방법은 카테터의 근위단의 Y 포트를 잠금 장치 안에 두는 것입니다.

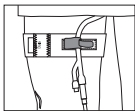

### 허리 밴드 착용 방법

1. 카테터를 제자리에 고정하려면, 허리 밴드를 상처 부위 위에서, 복부 둘레에 위치시키십시오. 면도할 필요가 없습니다. 녹색 카테터 잠금 탭은 배출관 부위 위로 중심이 맞추어져야 합니다. 밴드를 위치시킨 후에, 잠금 탭을 허리 밴드 쪽으로 누르십시오.
2. 카테터를 녹색 탭의 백색 바늘땀 줄 위에 두십시오.
3. 위의 3, 4 및 5 단계를 반복하십시오.

### 추가 이점

관입구 자극을 방지하는 데 도움이 되도록, 다리 밴드는 어느 방향으로든 회전시킬 수 있습니다. 다리를 주기적으로 번갈아 바꾸어 주는 것도 환자를 더 편안하게 하는데 보탬이 될 수 있습니다.

### 단일 환자용. 1회용.

착용 시연 영상을 보려면, [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)을 방문하십시오.

Dale 의료 제품은 이용하시는 병원/의료용품 공급상으로부터 구입하실 수 있습니다.

### 천연 고무 라텍스로 제조되지 않음.

Dale® & Hold-n-Place® 는 미국에 등록된 Dale Medical Products, Inc.의 상표입니다.

전화: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany (독일)

