
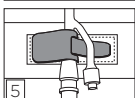
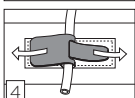
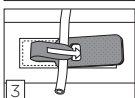
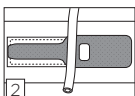
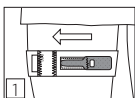


Dale®

Hold-n-Place® benstropp for foleykateter

Sette på benstroppen

1. Legg benstroppen høyt rundt pasientens lår slik at Dale-produktetiketten vender mot innsiden av benet. Strekk benstroppen på plass, og fest festefliken. Trykket er riktig når to fingre såvidt får plass under stroppen.
2. Plasser foleykateteret over den hvite sømmen på den grønne fliken. La det være en god sløyfe i kateteret ovenfor benstroppen for å unngå strekk i urinblæren, eller strekk kateteret hvis det er nødvendig.
3. Når kateteret sitter i riktig posisjon, stikker du den smale, grønne fliken over kateteret og gjennom den firkantede åpningen, slik at den grønne fliken overlapper.
4. Lås kateteret på plass ved å dra de grønne flikene i hver sin retning. Fest flikene. Hvis du må omposisjonere kateteret, løfter du opp en av de grønne flikene, justerer kateteret og fester fliken igjen.
5. En annen metode å sikre kateteret på, er å plassere Y-porten i den proksimale enden av kateteret i låseenheten.

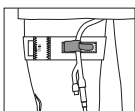

Sette på magebåndet

1. Sikre kateteret ved å legge magebåndet rundt magen, ovenfor sårstedet. Det er ikke nødvendig å barbere. Den grønne låsefliken til kateteret skal være midtstilt over dreneringsstedet. Etter at magebåndet er satt på, skal du trykke låsefliken inn på magebåndet.
2. Plasser kateteret over den hvite sømmen på den grønne fliken.
3. Gjenta trinn 3, 4 og 5 ovenfor.

Flere fordeler

Benstroppen kan vris i begge retninger, for å unngå meatusirritasjon. Det kan også være mer bekvemt for pasienten om bruken av høyre og venstre ben byttes på med jevne mellomrom.

Bare til bruk på én pasient. Til engangsbruk.

Du finner en video om påsetting på www.dalemed.com

Medisinske produkter fra Dale fås hos forhandlere av sykehusutstyr / medisinske produkter.

Produsert uten lateks av naturgummi.

Dale® og Hold-n-Place® er registrerte varemerker som tilhører Dale Medical Products, Inc. i USA.

TLF.: +1-508-695-9316

www.dalemed.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Tyskland

