
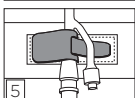
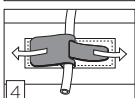
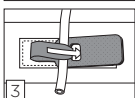
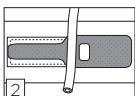
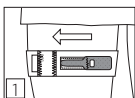


# Dale®

## Hold-n-Place® benband för Foleykateter

### Applicering av benbandet

1. Placera benbandet högt runt patientens lår med Dale-produktetiketten riktad mot benets insida. Sträck benbandet på plats och fäst kardborrefliken. Bandet sitter tillräckligt stramt när man kan få in två fingrar tätt under bandet.
2. Placera Foleykatetern över den gröna flikens vita stickning. Placera katetern i en vid slinga ovanför benbandet så att den inte drar i blåsan, eller sträck katetern för dragning när så krävs.
3. När katetern är i önskat läge, för in den smala, gröna fliken över katetern och genom den fyrkantiga öppningen så att de gröna flikarna överlappar.
4. Lås katetern i läge genom att dra de gröna flikarna åt motsatta håll. Fäst flikarna stadigt på plats. För att flytta om katetern: dra upp en av de gröna flikarna, justera katetern och sätt fast fliken igen.
5. En annan fästmetod är att placera Y-porten i kateterns proximala ände i låsanordningen.

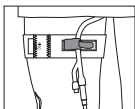

### Applicering av midjebandet

1. För att sätta fast katetern på plats, placera midjebandet runt magen, ovanför sårområdet. Rakning är inte nödvändigt. Den gröna kateterlåsningsfliken ska centreras över dräneringsstället. Tryck fast låsfliken på midjebandet efter att bandet placerats i läge.
2. Placera katetern över den gröna flikens vita stickning.
3. Upprepa stegen 3,4 och 5 ovan.

### Ytterligare fördelar

För att förhindra irritation av meatus kan benbandet vridas i valfri riktning. Patientens komfort kan också ökas genom att man regelbundet skiftar ben.

**För användning till en enstaka patient. Engångsprodukt.**

En video om applicering finns på [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

Dale medicinska produkter fås från er försäljare av sjukhus-/ medicinska produkter.

**Ej tillverkad med naturgummilatex.**

Dale® och Hold-n-Place® är registrerade varumärken som tillhör Dale Medical Products, Inc. i USA.

TEL.: +1-508-695-9316

[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Tyskland

