







Dale®

Hold-n-Place®

แถบรัดขาสายสวนปัสสาวะ Foley

วิธีการใช้แถบรัดขา

1. วางตำแหน่งแถบรัดขาให้พันที่รอบต้นขาด้านบนของผู้ป่วย โดยให้ป้ายผลิตภัณฑ์ของ Dale ซีเข้าด้านในของขา ดึงแถบรัดขายืดออกและติดเข้าหากันด้วยแถบกาว หากสามารถสอดนิ้วสองนิ้วเข้าใต้แถบรัดได้พอดีแสดงว่าแน่นกำลังดี
2. วางสายสวนปัสสาวะ Foley ทับบนรอยเย็บสีขาวของแถบล็อคสีเขียว ปลดปล่อยให้สายสวนปัสสาวะมีวงความยาวเพียงพอเหนือแถบรัดขาเพื่อหลีกเลี่ยงการดึงกระเพาะปัสสาวะหรือดึงสายสวนปัสสาวะเมื่อต้องการ
3. เมื่อสายสวนปัสสาวะอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ให้วางปลายแถบล็อคสีเขียวลงบนสายสวนปัสสาวะ แล้วเสียบเข้าไปในช่องว่างสี่เหลี่ยมจนแถบสีเขียวทับซ้อนกัน
4. ล็อคสายสวนปัสสาวะให้เข้าที่โดยดึงปลายสีเขียวทั้งสองข้างไปคนละทาง ดึงปลายให้เข้าที่ การจัดวางตำแหน่งสายสวนปัสสาวะใหม่: ดึงปลายสีเขียวข้างใดข้างหนึ่งขึ้น ขยับสายสวนปัสสาวะแล้วดึงปลายสีเขียวให้เข้าที่ใหม่
5. วิธีล็อคสายสวนปัสสาวะให้เข้าที่อีกวิธีหนึ่งคือ การวางปลายด้านในรูปตัว Y ให้ใกล้กับปลายของสายสวนปัสสาวะเข้าในอุปกรณ์การล็อค

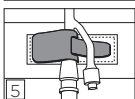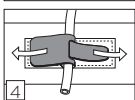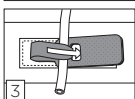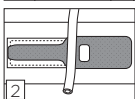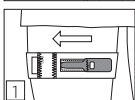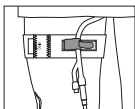

วิธีการใช้ชนิดแถบรัดเอว

1. จัดวางสายสวนปัสสาวะให้เข้าที่ โดยการวางตำแหน่งสายรัดเอวรอบๆ ท้องเหนือรอยแผล ไม่จำเป็นต้องโกนขน แถบสีเขียวล็อคสายสวนปัสสาวะควรอยู่เหนือบริเวณระบายปัสสาวะ จากนั้นให้ยึดแถบล็อคเข้ากับแถบรัดเอว
2. วางสายสวนปัสสาวะทับบริเวณรอยเย็บสีขาวของแถบล็อคสีเขียว
3. ทำขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 ซ้ำให้เหมือนกับข้างต้น

ผลประโยชน์เพิ่มเติม

เพื่อช่วยป้องกันอาการระคายเคืองจากปากช่อง แถบรัดขาสามารถสับเปลี่ยนทิศทางได้ การเปลี่ยนสลับขาเป็นระยะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายเพิ่มมากขึ้น

สำหรับใช้กับผู้ป่วยรายเดียว ใช้แล้วทิ้ง

หากท่านต้องการชมวิดีโอเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ กรุณาไปที่ www.dalemed.com

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของ Dale มีจำหน่ายที่โรงพยาบาล/สถานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของท่าน

ไม่ได้ผลิตจากยางลาเทกซ์ธรรมชาติ

Dale® & Hold-n-Place® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dale Medical Products, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา

โทรศัพท์: +1-508-695-9316

www.dalemed.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Germany

