
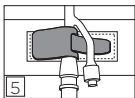
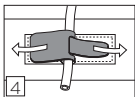
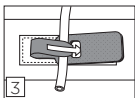
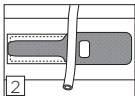
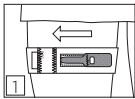


Dale®

Hold-n-Place® Foley Kateter Bacak Bandı

Bacak Bandı Uygulaması

1. Bacak bandını, Dale ürün etiketi bacağın iç kısmına bakacak şekilde hastanın uyluğu üzerinde yüksek bir yerde konumlandırın. Bacak bandını gererek yerleştirin ve kanca şeridi tutturun. İki parmak bandın altına rahatça girdiğinde uygun basınç sağlanmış demektir.
2. Foley kateteri yeşil şeridin beyaz dikişi üzerine yerleştirin. Mesanenin traksiyonunu önlemek için bacak bandı üzerinde kateterde bol bir halka bırakın; veya traksiyon gerektiğinde kateteri gerin.
3. Kateter istenen konumdayken dar, yeşil şeridi yeşil şerit üst üste binecek şekilde kateterden ve kare şekilli delikten geçirin.
4. Yeşil şeritleri karşı yönlerde çekerek kateteri yerine kilitleyin. Şeritleri sabitleyin. Kateteri yeniden konumlandırmak için: yeşil şeritlerden birini kaldırın, kateteri ayarlayın ve şeridi yeniden tutturun.
5. Bir diğer sabitleme yöntemi, kateterin proksimal ucunun Y portunu kilitleme cihazına yerleştirmektir.

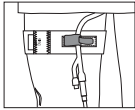

Bel Bandı Uygulaması

1. Kateteri yerine sabitlemek için bel bandını karın etrafında, yara bölgesinin üzerinde konumlandırın. Tıraş etmek gerekmez. Yeşil renkli kateter kilitleme şeridi, drenaj bölgesinin üzerinde ortalanmalıdır. Bant konumlandırıldıktan sonra kilitleme şeridini bel bandı üzerine bastırın..
2. Kateteri yeşil şeridin beyaz dikişi üzerine yerleştirin..
3. Yukarıdaki 3, 4 ve 5. adımları tekrarlayın.

Ek Faydalar

Bacak bandı meatus tahrişini önlemek üzere her iki yönde de döndürülebilir. Bacakların düzenli aralıklarla değiştirilmesi de hastanın rahatlığını artırabilir.

Tek hastada kullanılmak üzere. Atılabilir.

Uygulama videosu için lütfen www.dalemed.com web sitesine gidiniz.

Dale tıbbi ürünleri tercih ettiğiniz hastane/tıbbi malzeme tedarikçilerinden sağlanabilir.

Doğal kauçuk lateksle üretilmemiştir.

Dale® & Hold-n-Place® Dale Medical Products, Inc.'in ABD'de tescilli bir ticari markasıdır.

TEL.: +1-508-695-9316

www.dalemed.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Almanya

